

**SVEUČILIŠTE U SPLITU**  
**KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**

**ISPITIVANJE ODZIVA MEMBRANE NA BAZI  $\text{Ag}_2\text{S}:\text{AgCl}:\text{PTFE} = 1:1:2$  S  
UDJELOM NANOČESTICA  $\text{ZnO}$  0.8, 1.0, 1.2 %**

**ZAVRŠNI RAD**

**Mentor: doc. dr. sc. Ante Prkić**

**ANĐELA MASTELIĆ**

**Matični broj:1248**

**Split, rujan 2018.**



**SVEUČILIŠTE U SPLITU**  
**KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE**  
**KEMIJSKO INŽENJERSTVO**

**ISPITIVANJE ODZIVA MEMBRANE NA BAZI  $\text{Ag}_2\text{S}:\text{AgCl}:\text{PTFE} = 1:1:2$  S  
UDJELOM NANOČESTICA  $\text{ZnO}$  0.8, 1.0, 1.2 %**

**ZAVRŠNI RAD**

**Mentor: doc. dr. sc. Ante Prkić**

**ANDELA MASTELIĆ**

**Matični broj:1248**

**Split, rujan 2018.**

**UNIVERSITY OF SPLIT**

**FACULTY OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY CHEMISTRY**

**CHEMICAL TECHNOLOGY**

**CHEMICAL ENGINEERING**

**Testing of the membrane responses made of  $\text{Ag}_2\text{S}:\text{AgCl}:\text{PTFE} = 1:1:2$  with ZnO  
nanoparticles fraction of 0.8, 1.0, 1.2 %**

**BACHELOR THESIS**

**Mentor: Assistant Professor PhD Ante Prkić**

**ANDELA MASTELIĆ**

**Parent number:1248**

**Split, September 2018.**



## TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

ZAVRŠNI RAD

Sveučilište u Splitu  
Kemijско-tehnološki fakultet  
Preddiplomski studij kemijske tehnologije

Znanstveno područje: Prirodne znanosti  
Znanstveno polje: Kemija

Tema rada je prihvaćena na 3. sjednici Vijeća Kemijско-tehnološkog fakulteta održanoj 29. studenog 2017.

Mentor: doc. dr. sc. Ante Prkić  
Pomoć pri izradi: mag. chem. Andrea Sedlar

### ISPITIVANJE ODZIVA MEMBRANE NA BAZI $\text{Ag}_2\text{S}:\text{AgCl}:\text{PTFE} = 1:1:2$ S UDJELOM NANOČESTICA 0.8, 1.0, 1.2 % Anđela Mastelić, 1248

**Sažetak:** Prethodno su izrađene ionsko-selektivne membrane od srebrovog sulfida s nanočesticama cinkovog oksida na kojima je izvršeno testiranje na srebrove i kloridne ione. Potenciometrijska metoda se pokazala najučinkovitijom zbog jednostavnosti, praktičnosti i niske cijene. Selektivnost same metode je ispitana promjenom reakcijskih uvjeta kao što je pH otopine uzorka. Prvo se ispituje odziv ionsko-selektivne elektrode na  $\text{Ag}^+$  ione, a zatim na  $\text{Cl}^-$  ione, pri  $\text{pH} = 0$ ,  $\text{pH} = 1$  i  $\text{pH} = 2$ . Rezultati su prikazani grafički.

**Ključne riječi:** ionsko-selektivne elektrode, potenciometrija, membranske elektrode, srebrovi ioni, kloridni ioni

**Rad sadrži:** 46 stranica, 19 slika, 12 tablica, 0 priloga, 8 literaturnih referenci

**Jezik izvornika:** hrvatski

**Sastav Povjerenstva za obranu:**

1. izv. prof. dr. sc. Josipa Giljanović – predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Vesna Sokol – član
3. doc. dr. sc. Ante Prkić – član-mentor

**Datum obrane:** 27. rujan 2018.

Rad je u tiskanom i elektroničkom (pdf format) obliku pohranjen u Knjižnici Kemijско-tehnološkog fakulteta Split, Ruđera Boškovića 35.

## BASIC DOCUMENTATION CARD

BACHELOR THESIS

University of Split  
Faculty of Chemistry and Technology Split  
Chemical Technology

Scientific area: Natural Sciences

Scientific field: Chemistry

Thesis subject was approved by Faculty Council of Faculty of Chemistry and Technology on 3rd meeting held on November 29th 2017.

Mentor: Assistant Professor PhD Ante Prkić

Technical assistance: Andrea Sedlar

**Testing of the membrane responses made of  $\text{Ag}_2\text{S}:\text{AgCl}:\text{PTFE} = 1:1:2$  with ZnO nanoparticles fraction of 0.8, 1.0, 1.2 %**

Andela Mastelić, 1248

**Abstract:** Premade ion-selective membranes of silver sulfide with zinc oxide nanoparticles on which was tested on silver and chloride ions. Due the simplicity and low cost, potentiometric method was used. The selectivity of the method is increased by changing the reaction conditions such as the pH of the sample solution. It was examined the response of silver and chloride to ion-selective electrodes at pH = 0, pH = 1 and pH = 2. The results were shown in graphically.

**Keywords:** ion-selective electrode, potentiometry, membrane electrode, silver ions, chloride ions

**Thesis contains:** 46 pages, 19 figures, 12 tables, 0 supplements, 8 references

**Original in:** Croatian

**Defence Committee:**

1. PhD Josipa Giljanović, associate professor, chair person

2. PhD Vesna Sokol, associate professor. member

3. PhD Ante Prkić, assistant professor, supervisor

**Defence date:** September 27th 2018.

**Printed and electronic (pdf format) version of thesis is deposited in Library of Faculty of Chemistry and Technology Split, Ruđera Boškovića 35.**





Završni rad izrađen je u Zavodu za analitičku kemiju, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu pod mentorstvom doc.dr.sc. Ante Prkića uz pomoć Andree Sedlar, mag. chem., u kolovozu 2018.godine.

## **Zahvala**

*Iskreno se zahvaljujem mentoru doc. dr. sc. Anti Prkiću koji je svojim savjetima, strpljenjem i stručnoj pomoći pomogao u izradi ovog završnog rada.*

### **Zadatak završnog rada**

- Testiranje odziva triju membrana za ionsko-selektivne elektrode na srebrove i kloridne ione u otopinama srebrovog nitrata i natrijevog klorida te utvrđivanje moguće praktične primjene pri  $\text{pH} = 0, 1$  i  $2$ .

## SAŽETAK

Prethodno su izrađene ionsko-selektivne membrane od srebrovog sulfida u koje su dodane nanočestice cinkovog oksida na kojima je izvršeno testiranje na srebrove i kloridne ione.

Potenciometrijska metoda se pokazala najučinkovitijom zbog jednostavnosti, praktičnosti i niske cijene. Selektivnost same metode je ispitana promjenom reakcijskih uvjeta kao što je pH otopine uzorka.

Prvo se ispituje odziv ionsko-selektivne elektrode na srebrove ione, a zatim na kloridne ione pri pH=0, pH=1 i pH=2. Rezultati su prikazani grafički.

## **SUMMARY**

Pre-made ion-selective membranes of silver sulfide with zinc oxide nanoparticles were tested both on silver and chloride ions.

Due the simplicity and low cost, potentiometric method was used. The selectivity of the method is increased by changing the reaction conditions such as the pH of the sample solution.

It was examined the response of silver and chloride ions to ion-selective electrodes at pH=0, pH=1 and pH=2. The results were shown graphically.

## SADRŽAJ

<b>UVOD</b> .....	<b>1</b>
<b>1 OPĆI DIO</b> .....	<b>2</b>
1.1 POTENCIOMETRIJA .....	3
1.1.1 Referentne elektrode .....	4
1.1.2 Standardna vodikova elektroda .....	5
1.1.3 Kalomelova elektroda .....	6
1.1.4 Elektroda srebro/srebrov klorid .....	8
1.1.5 Elektrolitni most.....	9
1.1.6 Potenciometrijski senzori.....	9
1.1.7 Indikatorske elektrode.....	10
1.1.8 Metalne (kovinske) elektrode.....	10
1.1.9 Membranske elektrode .....	14
1.1.10 Specijalne ionsko-selektivne elektrode.....	17
<b>2 EKSPERIMENTALNI DIO</b> .....	<b>19</b>
2.1 PRIBOR I KEMIKALIJE .....	20
2.2 PRIPRAVA OTOPIVA ZA RAD .....	21
2.3 POSTUPAK RADA .....	21
2.4 REZULTATI .....	23
<b>3 RASPRAVA</b> .....	<b>41</b>
<b>4 ZAKLJUČAK</b> .....	<b>43</b>
<b>5 LITERATURA</b> .....	<b>45</b>



## UVOD

Iako su potenciometrijske metode najčešće korištene, nedostatak u odnosu na ostale tehnike ipak postoji. Radi se o značajno višoj koncentraciji dokazivanja tj. većoj detekcijskoj granici te manjoj selektivnosti. Analit se može mjeriti u širokom koncentracijskom području, a selektivnost se može povećati promjenom reakcijskih uvjeta npr. pH otopine uzorka, dodatak kompleksirajućeg sredstva, redoks-reagensa i sl. Kombinacijom je moguće razviti jeftinu, brzu, jednostavnu i selektivnu potenciometrijsku metodu za određivanje različitih analita. U ovom radu korištena je potenciometrijska metoda određivanja  $\text{Ag}^+$  i  $\text{Cl}^-$  iona. Temelji se na postupnom dodavanju poznatog volumena reagensa, a kao funkcija dodanog volumena reagensa mjeri se potencijal između dvije elektrode, referentne i indikatorske.



**1 OPĆI DIO**

## 1.1 Potencimetrija

Potencimetrija je metoda elektrokemijske analize koja se zasniva na ovisnosti potencijala indikatorske elektrode o aktivitetu određene ionske vrste s kojom je ona u aktivnom, reverzibilnom kontaktu u ispitnoj otopini.<sup>1</sup>

Temelji se na mjerenju razlike potencijala između dvije elektrode, indikatorske i referentne, uronjene u elektrokemijsku ćeliju s elektrolitom tako da kroz elektrokemijsku ćeliju teče električna struja neznatne jakosti koja ne utječe na ravnotežno stanje elektroda. Električni potencijal na elektrodama uspostavlja se zahvaljujući spontanim elektrokemijskim reakcijama.

Princip potencimetrijskog određivanja koncentracije nekog iona u otopini sastoji se od mjerenja elektromotorne sile članka, koji se sastoji od dvije elektrode, indikatorske i referentne, koje su uronjene u istu otopinu. Apsolutne vrijednosti pojedinačnih potencijala polučlanka ne mogu se odrediti eksperimentalno, stoga se određuju naponi članka. Potencijal referentne elektrode ne ovisi o aktivitetima aktivnih vrsta te se zbog toga tijekom mjerenja ne mijenja, dok potencijal radne elektrode ovisi o aktivitetu odnosno koncentraciji molekularnih vrsta. Signal pobude je kemijska reakcija, a signal odziva električna veličina, tj. razlika potencijala između elektroda.

Laboratorijskim eksperimentom se mogu odrediti samo naponi članaka. Zbog toga je određeno da je potencijal standardne vodikove elektrode 0,000 V pri svim temperaturama, a u literaturi su dani standardni elektrodni potencijali u odnosu na standardnu vodikovu elektrodu. Razlikuju se galvanski i elektrolitički elektrokemijski članci koji se dalje dijele u reverzibilne (povratne) i ireverzibilne (nepovratne). Galvanski članak je elektrokemijski članak koji može vršiti električni rad na račun elektrokemijskih reakcija koje se spontano odvijaju unutar članka. Sastoji se od dva polučlanka, a svaki polučlanak od elektrode uronjene u elektrolit. Kod elektrode povezanih nekim vodičem, elektroni putuju kroz vodič od negativnog pola prema pozitivnom polu, odnosno tok elektrona se kreće s anode (oksidacija) prema katodi (redukcija) preko vanjskog vodiča.

Elektrolitički članak je elektrokemijski članak unutar kojeg se pomoću vanjskog izvora struje mogu pokrenuti elektrokemijske reakcije koje se ne odvijaju spontano unutar članka. Elektrokemijska reakcija u galvanskom članku može se preokrenuti ako se obrnu polovi

elektroda. Kod reverzibilnih članaka dolazi do promjene toka elektrona kada se promijeni smjer elektrokemijske reakcije. U ireverzibilnim člancima promjena smjera struje uzrokuje potpuno različite reakcije na jednoj ili objema elektrodama. U većini slučajeva elektrode su uronjene u različite otopine da se spriječi njihovo miješanje, a elektricitet se iz jedne otopine u drugu provodi elektrolitnim mostom.


### 1.1.1 Referentne elektrode

Referentna elektroda je polučlanak s točno poznatim elektrodnom potencijalom koji ne ovisi o koncentraciji analita ni o koncentracijama drugih iona prisutnih u ispitivanoj otopini. Dogovorno je uzeto da je u potenciometrijskim mjerenjima referentna elektroda uvijek anoda.<sup>3</sup>

Idealna referentna elektroda trebala bi imati sljedeće osobine: stalan i poznat potencijal koji je neovisan o sastavu otopine, mora biti jednostavne izvedbe, te pri prolazu malih struja potencijal se ne smije mijenjati.

Standardna vodikova elektroda je univerzalna referentna elektroda prema kojoj se iskazuju potencijali ostalih elektroda. No, zbog svoje složenosti u izvedbi umjesto nje češće se koriste kalomelova i srebro/srebrov klorid elektroda.


Glavna karakteristika je ta da se ćelija sa srebrnom žicom i zasićenom otopinom srebrova klorida nalazi u unutrašnjem dijelu tijela elektrode, dok se u vanjskoj cijevi koja sadrži drugi elektrolit koji je s ispitivanom otopinom povezan preko elektrolitskog mosta tzv. „frita“. Otopina u vanjskom omotaču referentne elektrode gradi „solni most“ između unutrašnje otopine referentne elektrode i ispitivane otopine. Tako se sprječava kontaminacija unutrašnje otopine referentne elektrode s ionima iz ispitivane otopine.

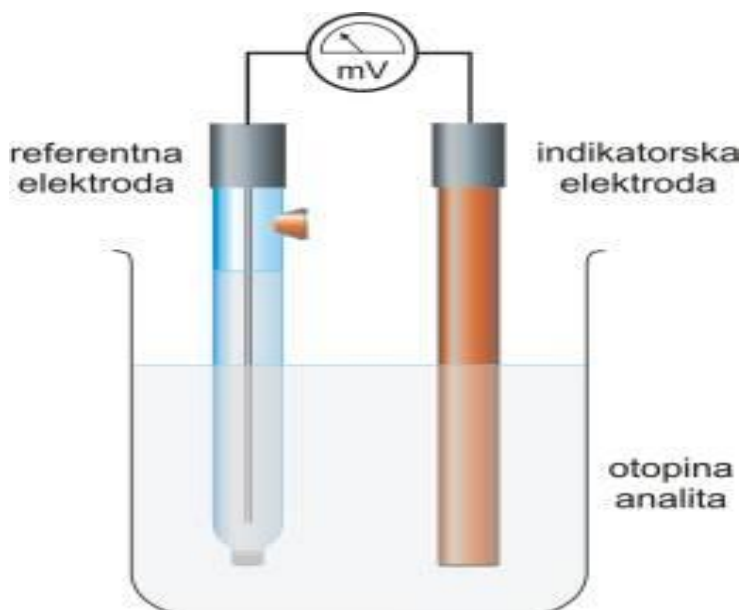


Slika 1. Prikaz referentne elektrode<sup>2</sup>

### 1.1.2 Standardna vodikova elektroda

Standardna vodikova elektroda (SVE) je univerzalna referentna elektroda prema kojoj se iskazuju potencijali ostalih elektroda. Sastoji se od pločice izrađene od spužvaste platine uronjene u otopinu vodikovih iona jediničnog aktiviteta kroz koju se propušta plinoviti vodik pod tlakom od 101 325 Pa. Standardni elektrodni potencijal neke elektrode definira se kao standardna elektromotorna sila članka u kojoj je jedna od elektroda standardna vodikova elektroda.<sup>3</sup>

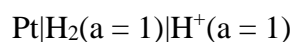


Elektrodna reakcija u polučlanku je:

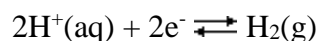

a potencijal se može prikazati:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{H_2(g)}}{a_{H^+}^2}$$


$$= E^\circ - \frac{0,0592}{2} \log \frac{a_{H_2(g)}}{a_{H^+}^2}$$

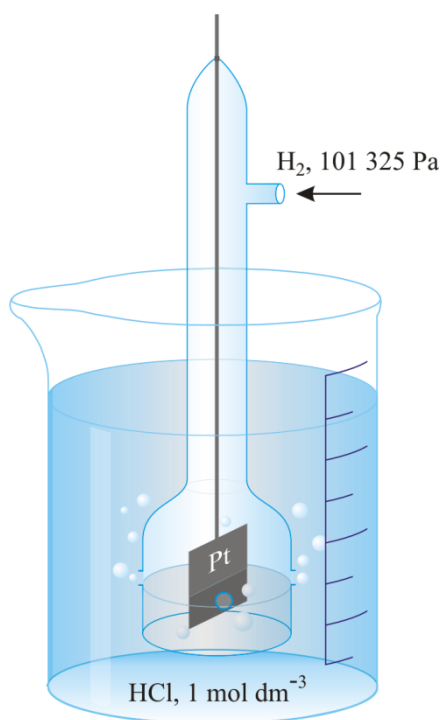

**Slika 2.** Standardna vodikova elektroda<sup>3</sup>


### 1.1.3 Kalomelova elektroda

Kalomelova elektroda se najčešće upotrebljava kao referentna elektroda u laboratoriju, jer ju je lako pripremiti tako da ima točno poznat potencijal. U unutrašnjoj cijevi nalazi se pasta od žive, kalomela (kalomel je trivijalno ime za živin(I) klorid,  $Hg_2Cl_2$ ) i otopine kalijeva klorida u koju je uronjena platinska žica. Ta je pasta s otopinom kalijeva klorida u vanjskoj cijevi spojena pomoću malog otvora na dnu. Veza s otopinom analita ostvaruje se preko sinterirane pločice, poroznog stakla ili porozne vlaknaste brtve.

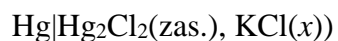


gdje je  $x$  koncentracija KCl u otopini.

Elektrodna reakcija u polučlanku je:

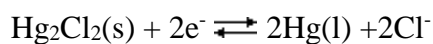

a potencijal se može prikazati:


$$\begin{aligned} E_{\text{ZKE}} &= E^\circ - \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{\text{Hg}(\text{l})} \cdot a_{\text{Cl}^-}^2}{a_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2}} \\ &= E^\circ - \frac{RT}{2F} \ln a_{\text{Cl}^-} \end{aligned}$$

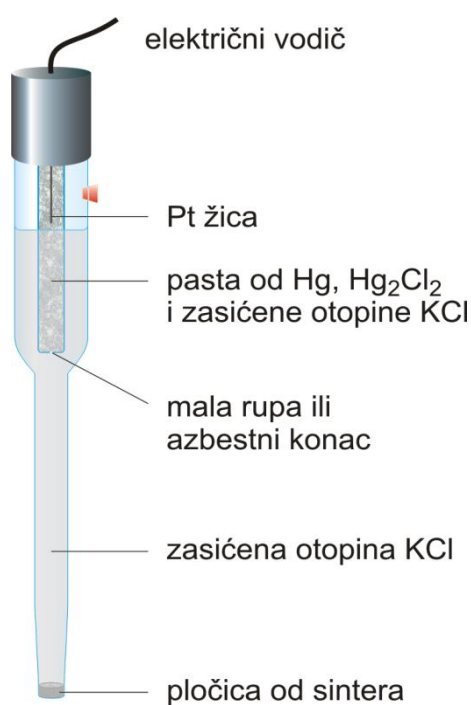


**Slika 3.** Shematski prikaz zasićene kalomelove elektrode<sup>3</sup>

#### 1.1.4 Elektroda srebro/srebrov klorid

Srebro/srebrov klorid elektroda je najčešće korištena referentna elektroda zbog svoje jednostavnosti, neotrovnosti, niske cijene i stabilnosti. Sastoji se od srebrene žice prevučene tankim slojem srebrova klorida, uronjene u otopinu kalijevog klorida poznate koncentracije i zasićenog srebrovim kloridom. Potencijal elektrode srebro/srebrov klorid je temperaturno i koncentracijski ovisan, a pri temperaturi od 25 °C iznosi 0,199 V.<sup>6</sup>

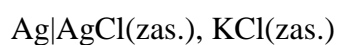


Elektrodna reakcija u polučlanku je:

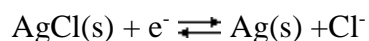

a potencijal se može prikazati:

$$\begin{aligned} E &= E^\circ - 0,059 \log \frac{a_{\text{Ag}(\text{s})} a_{\text{Cl}^-}}{a_{\text{AgCl}}} \\ &= E^\circ - 0,059 \log a_{\text{Cl}^-} \end{aligned}$$

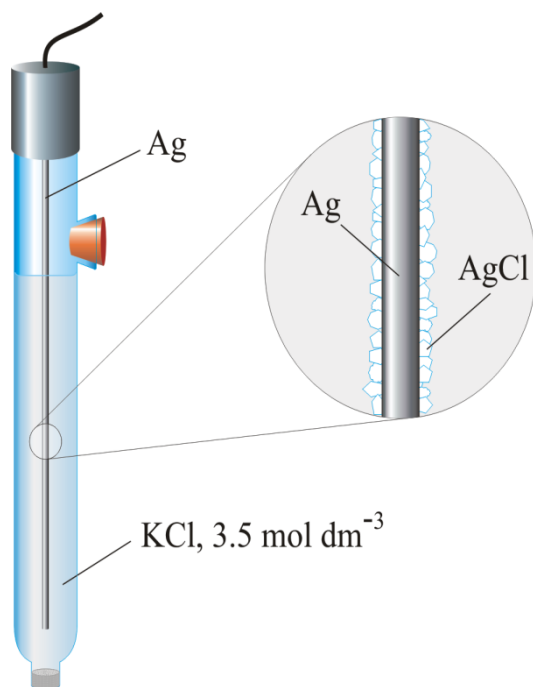

**Slika 4.** Elektroda Ag/AgCl<sup>3</sup>

### 1.1.5 Elektrolitni most

Elektrolitni most sprječava miješanje radne otopine s otopinom u referentnoj elektrodi. Koncentracija elektrolita u mostu mora biti velika radi što bolje vodljivosti i mora imati ione približno jednake pokretljivosti kako bi difuzijski potencijal bio što manji. Zasićena otopina kalijeva klorida odgovara tim zahtjevima i njen kontaktni potencijal iznosi nekoliko milivolta.

### 1.1.6 Potenciometrijski senzori

Potenciometrijski senzori su senzori koji daju signal razlike potencijala između indikatorske i referentne elektrode koncentracije analita. Razlika potencijala nastaje zbog kemijske reakcije analita s aktivnim centrima na površini indikatorske elektrode.



Najveći su razvoj pokazali elektrokemijski senzori. U usporedbi s drugim vrstama senzora, npr. optičkim, masenim i termičkim sensorima, elektrokemijski senzori su se pokazali vrlo privlačnima dostupne cijene, praktičnosti i jednostavnosti. U većini elektrokemijskih senzora analit reagira s aktivnom tvari senzora, pri čemu dolazi do promjene fizikalnih svojstava. U elektrokemijskim člancima, potenciometrijski senzori su uvijek indikatorske elektrode.

### **1.1.7 Indikatorske elektrode**

Idealna indikatorska elektroda daje brz i ponovljiv odaziv na promjene koncentracije iona (ili skupine iona) analita. Indikatorske elektrode koje koristimo u potenciometriji mogu biti raznolike. Razvrstavaju se na temelju razlike u načinu nastajanja potencijala na dodirnoj površini elektroda-otopina.

Razlika potencijala na dodirnoj površini elektroda-otopina posljedica je elektrokemijske reakcije na površini elektrode. Pritom nastaje razdvajanje naboja na dodirnoj površini, a time i razlika potencijala između elektrode i otopine s njom u kontaktu.

Dvije su temeljne vrste indikatorskih elektroda:

- Kovinske (metalne) elektrode

- Membranske elektrode

### **1.1.8 Metalne (kovinske) elektrode**

Kod metalnih (kovinskih) elektroda razlika potencijala na dodirnoj granici elektroda-otopina posljedica je redoks-reakcije na elektrodi. Kod membranskih elektroda potencijal elektrode proizlazi iz promjene slobodne entalpije reakcije prijelaza iona, ionskom izmjenom, adsorpcijom, ekstrakcijom ili drugim načinom, kroz međusloj membrana-ispitivana otopina.

Metalne indikatorske elektrode se uglavnom dijele na:


- Elektrode I. reda
- Elektrode II. reda
- Elektrode III. reda
- inertne redoks elektrode

### 1.1.8.1 Elektrode I. reda

Elektrode I. reda su čiste kovine koje su u neposrednoj ravnoteži s kationom te kovine. Tako se ponašaju metali: bizmut, bakar, cink, kadmij, kositar, olovo, srebro, talij i živa.

Korištenje cinka kao elektrode I. reda u kiselim otopinama dolazi do otapanja cinka.

Ravnoteža između metala M i njegovih kationa  $M^{n+}$  je:

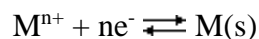

za koju se potencijal računa prema formuli:

$$E_{ind} = E^{\circ}_{M^{n+}} - \frac{0,059}{n} \log \frac{1}{a_{M^{n+}}} = E^{\circ}_{M^{n+}} + \frac{0,059V}{n} \log a_{M^{n+}}$$

umjesto  $a_{M^{n+}}$  u razrijeđenim otopinama može se uzeti koncentracija  $[M^{n+}]$ , pa se elektrodni potencijal može pisati:


$$E_{ind} = E^{\circ}_{M^{n+}} - \frac{0,059}{n} pM$$

Iz jednadžbe može se zaključiti da povećanjem koncentracije metalnih iona u otopini, potencijal elektrode postaje pozitivniji, a smanjenjem koncentracije negativniji. Kod nekih kovina često nagib odstupa od idealnog što se može pripisati napetosti i deformacijama u kristalnoj strukturi ili prisutnosti tankog sloja oksida na njenoj površini.<sup>3</sup>

### 1.1.8.2 Elektrode II. reda

Elektrode drugog reda jesu metalne elektrode kojima je ravnotežni potencijal funkcija koncentracije aniona u otopini. Primjer su srebro/srebrov klorid i kalomelova elektroda. U obiju je elektroda metal prekriven svojom teško topljivom soli i uronjen u otopinu koja sadrži isti anion kao i teško topljiva sol. Na taj način je koncentracija kationa metala, odnosno elektrodni potencijal, određena koncentracijom aniona preko produkta topljivosti teško topljive soli.<sup>8</sup>

U slučaju srebrove elektrode reakcija glasi:

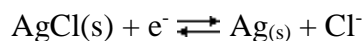

pri čemu je  $E^\circ_{\text{AgCl}} = 0,222 \text{ V}$ .

Aktivitet  $\text{Ag}^+$  jednak je:

$$a_{\text{Ag}^+} = \frac{K_{sp}^\circ}{a_{\text{Cl}^-}}$$

Prema Nernstovoj jednadžbi potencijal elektrode je:

$$E_{\text{ind}} = E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} + 0,059V \log \frac{K_{sp}^\circ}{a_{\text{Cl}^-}}$$

U otopini zasićenoj srebrovim kloridom srebrena elektroda može poslužiti kao indikatorska elektroda drugog reda za kloridne ione.

### **1.1.8.3 Elektrode III. reda**

Elektrode trećeg reda jesu metalne elektrode kojima je elektrodni potencijal funkcija koncentracije nekog drugog kationa, ali ne kationa metala od kojeg je elektroda. Potencijal ovih elektroda ovisi o koncentraciji njihovog kationa u otopini, ali njegova je koncentracija kontrolirana koncentracijom zajedničkog aniona. Koncentracija zajedničkog aniona opet je u ovisnosti o koncentraciji zajedničkog kationa. Ove su elektrode vrlo tromе i nestabilne što je posljedica serije ravnoteža koje se moraju uspostaviti prije nego što se dobije stabilni potencijal.

Živina elektroda može poslužiti i kao elektroda trećeg reda za mjerenje aktiviteta (koncentracije) kationa koji s  $Y^{4-}$  ionima tvore stabilne komplekse, ali manje stabilnosti od kompleksa  $HgY^{2-}$ .

### **1.1.8.4 Inertne metalne elektrode za redoks sustave**

Inertne kovine (zlato, platina ili paladij) i ugljik pokazuju odziv na potencijal redoks sustava s kojim su u dodiru. Redoks elektrodama nazivaju se one kovinske elektrode u kojima metal elektrode sam ne sudjeluje u redoks reakciji, nego služi samo kao nosioc elektrona drugog redoks para. Njihov standardni elektrodni potencijal jako je pozitivan te uronjene u otopinu poprimaju potencijal koji ovisi samo o svojstvima redoks sustava u otopini.

### 1.1.9 Membranske elektrode

Selektivne membranske elektrode imaju vrlo široku primjenu u potenciometriji. Dizajnirane su tako da njihov potencijal ovisi o aktivitetu jedne ionske vrste prisutne u potenciometrijskoj ćeliji. Pretpostavi li se granična površina između dviju elektrolitnih faza kroz koju može prolaziti jedna ionska vrsta tada se ovisno o aktivitetu tih aktivnih iona s jedne odnosno druge strane na graničnoj površini pojavljuje razlika potencijala. Ako se pretpostavi da je selektivno ponašanje granične površine ostvareno s pomoću idealne membrane, razlika se potencijala na membrani ( $E_m$ ) pri kojoj se uspostavlja dinamička ravnoteža na graničnoj površini može se prikazati formulom:<sup>7</sup>

$$E_m = \frac{RT}{z_i F} \ln \frac{a_i}{a_{ir}}$$

$a_j$  – aktivitet iona na jednoj strani

$a_{ir}$  – aktivitet iona na drugoj strani

Ako se pretpostavi da je  $a_{ir}$  konstantan  $E_m$  se može prikazati:

$$E_m = K + \frac{RT}{z_j F} \ln a_j$$

$$K = - \frac{RT}{z_j F} \ln a_j$$

Prikazuje se istom relacijom kao i za redoks-sustav iako je način uspostavljanja potencijala različit (na membrani izmjena iona, na kovini redoks-reakcija).

Obzirom na sastav membrane membranske elektrode mogu se podijeliti na: elektrode s kristalnom membranom mogu imati homogene i heterogene membrane i elektrode s nekristalnom membranom su staklene elektrode, elektrode s mobilnim prenosiocem.

### 1.1.9.1 Elektrode s kristalnom membranom

Membrana ovih elektroda sadrži slabo topljivu sol metala kao aktivnu komponentu. Selektivnost ovih membrana je u ovisnosti o konstanti produkta topljivosti slabo topljive soli koje čine membranu. Potencijal kristalnih membranskih elektroda posljedica je stanja ravnoteže reakcije zamjene iona u otopini i u čvrstoj fazi membrane. Ove elektrode su selektivne na ione sadržane u membrani.

#### a) Homogene membrane

Ove membrane sadrže kristalnu supstancu jednog spoja ( $\text{Ag}_2\text{S}$ ), homogene smjese spojeva ( $\text{AgI}/\text{Ag}_2\text{S}$ ) ili mogu biti monokristalne pločice ( $\text{LaF}_3$ ).

Često se izrađuju membrane od smjese dviju (rijetko više) kristalnih tvari od kojih je, redovito, samo jedna elektrokemijski aktivna tvar membrane. Površina elektrode je selektivna i na druge molekulske vrste koji s ionima membrane tvore teško topljive soli ili stabilne topljive komplekse. Tako je membrana izgrađena od srebrova sulfida selektivna za ione  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{I}^-$ ,  $\text{Hg}_2^{2+}$  i druge ione koji tvore slabo topljive sulfide. U vodljivim membranama (onima sa srebrovim solima) električni kontakt se može ostvariti izravno preko metalnog vodiča s unutarnjom stranom membrane.<sup>7</sup>

#### b) Heterogene membrane

Kod ovih elektroda aktivna tvar je dispergirana u čvrstom, elektrokemijski inaktivnom nosivom materijalu. Kao nosivi materijal najčešće se koristi silikonska guma ili polimerni

materijali na bazi poli(vinil-klorida), polietilena i poli(dimetil-silokana).

Heterogene membrane pripravlja se prešanjem aktivnog materijala pomiješanog sa silikonskom gumom (ili drugim nosivim materijalom). Nakon stvrdnjavanja membrane se lijepe na otvor staklenog ili plastičnog nosača. Električni kontakt se ostvaruje preko unutrašnje elektrolitne otopine i unutrašnje referentne elektrode. Ove elektrode se moraju prije upotrebe kondicionirati u otopini iona za koju su selektivne.<sup>7</sup>

### 1.1.9.2 Elektrode s nekristalnom membranom


Ove elektrode sadrže ionske ili nenabijene čestice kao aktivne komponente membrana. Inaktivni nosač membrane može biti porozan (npr. mikroporozni filter) ili neporozan npr. staklo, PVC. Staklena elektroda je jedna od prvih membranskih elektroda. Sastoji se od Ag/AgCl elektrode u otopini klorovodične kiseline stalnog pH koja se nalazi unutar posudice tankih staklenih stjenki. Pri određivanju pH staklena elektroda se spaja s nekom referentnom elektrodom radi mjerenja elektromotorne sile članka. Shematski prikaz ovog članka je:

ZKE |  $[H_3O^+] = a_1$  | staklena membrana |  $[H_3O^+] = a_2, [Cl^-] = 1.0 \text{ M}, AgCl(zas) | Ag$

$a_1$  – aktivitet vanjske otopine (nepoznat)

$a_2$  – aktivitet unutarnje otopine (konstantan)

Membrane su od stakla specijalnog kemijskog sastava i pouzdane su do pH = 12, a one od litijevog stakla i iznad pH 12. Na suha stakla pH ne utječe pa se staklena elektroda prije mjerenja mora močiti u vodi. Staklene elektrode imaju veliki otpor pa je s njima moguće raditi samo pomoću vrlo osjetljivih instrumenata - pH-metrima. Vodljivost staklene elektrode posljedica je kretanja  $Na^+$  i  $H^+$  kationa. Natrijevi kationi nose naboj u suhoj unutrašnjosti.

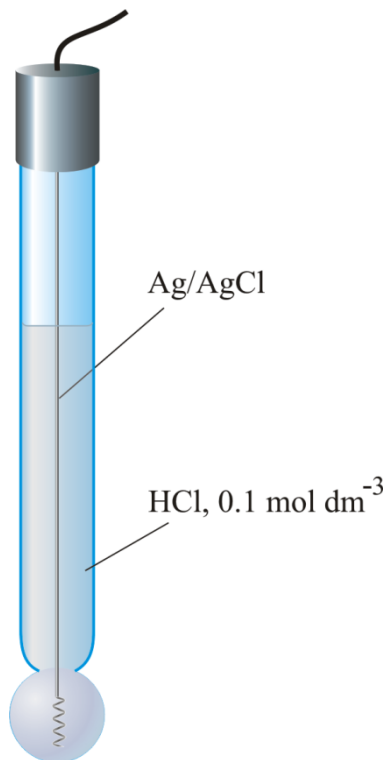

**Slika 5.** Shematski prikaz elektrode s nekristalnom membranom – staklena elektroda za mjerenje pH<sup>2</sup>

### 1.1.10 Specijalne ionsko-selektivne elektrode


Ove elektrode obično sadrže dvije membrane odvojene tankim slojem elektrolitne otopine.

#### 1.1.10.1 Elektrode za plinove

Takve elektrode sadrže dvije membrane. Između hidrofobne, za plin propusne membrane i membrane selektivne za ione (najčešće staklena membrana pH elektrode) nalazi se tanki sloj elektrolitne otopine, u kojoj interakcijom s određenim plinom nastaju ioni koji



utječu na potencijal elektrode. Potencijal elektrode je proporcionalan parcijalnom tlaku mjenog plina u uzorku.

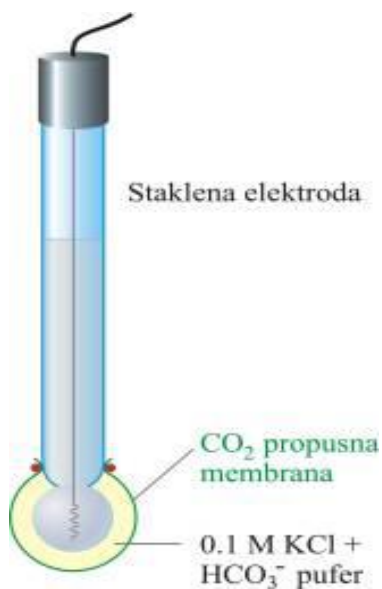

**Slika 6.** Shematski prikaz elektrode za plinove<sup>3</sup>

### 1.1.10.2 Biosenzori (enzimske elektrode)

Princip rada ovih elektroda temeljen je na specifičnom katalitičkom djelovanju enzima za selektivno određivanje koncentracije određene molekulske vrste. Prostor između osjetljive površine selektivne elektrode i dijafragme ispunjen je materijalom u kojem je imobiliziran enzim. Katalitičkim djelovanjem enzima na određenu molekulsku vrstu, koja difundira u taj prostor iz ispitivanog uzorka, nastaje produkt na koji je indikatorska elektroda selektivno osjetljiva. Prva takva elektroda je bila elektroda za mjerenje koncentracije uree.

## **2 EKSPERIMENTALNI DIO**

## 2.1 Pribor i kemikalije

Pribor koji je korišten tijekom rada je:

- Ionsko-selektivna sulfatna elektroda
- pH metar, Metrohm, Njemačka
- analitička vaga, Mettler Toledo, SAD
- magnetska mješalica, Berghoff, Njemačka
- mikropipeta (5 ml)
- odmjerne tikvice
- milivoltmetar

Kemikalije i otapala:

- srebrov nitrat ( $\text{AgNO}_3$ )
- natrijev klorid ( $\text{NaCl}$ )
- perklorna kiselina ( $\text{HClO}_4$ )

## 2.2 Priprava otopina za rad

### Priprava otopine NaCl u različitim pH

$$c(\text{NaCl}) = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$$

$$V = 0,5 \text{ L}$$

$$m(\text{NaCl}) = c \cdot M \cdot V = 0,1 \text{ mol L}^{-1} \cdot 58,443 \text{ g L}^{-1} \cdot 0,5 \text{ L} = 5,8443 \text{ g (za 1 L)}$$

$$m(\text{NaCl}) = 1,4611 \text{ g (za 250 mL)}$$

Izračunata masa se otapa u odgovarajućem pufer u određenom volumenu.

### Priprava otopine AgNO<sub>3</sub>

$$c(\text{AgNO}_3) = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$$

$$m(\text{AgNO}_3) = 0,1 \text{ mol L}^{-1} \cdot 169,87 \text{ g L}^{-1} \cdot 2 \text{ L} = 34 \text{ g}$$

Slijedi standardizacija AgNO<sub>3</sub> titracijom koristeći primarni standard NaCl-a.

## 2.3 Postupak rada

Vrši se testiranje na srebrove i kloridne ione. Ispituju se 3 membrane:

1. M113

$$m(\text{Ag}_2\text{S}) = 0,083 \text{ g} , m(\text{AgCl}) = 0,166 \text{ g} , m(\text{PTFE}) = 0,25 \text{ g} , w(\text{ZnO}) = 0.8\%$$

2. M116


$$m(\text{Ag}_2\text{S}) = 0,083 \text{ g} , m(\text{AgCl}) = 0,166 \text{ g} , m(\text{PTFE}) = 0,25 \text{ g} , w(\text{ZnO}) = 1.0\%$$

3. M117

$$m(\text{Ag}_2\text{S}) = 0,083 \text{ g} , m(\text{AgCl}) = 0,166 \text{ g} , m(\text{PTFE}) = 0,25 \text{ g} , w(\text{ZnO}) = 1.2\%$$

Započinje se s 50 mL 0,1 M otopine srebrovog nitrata (za  $\text{Ag}^+$  ione) ili otopina natrijevog klorida (za  $\text{Cl}^-$  ione) , stavlja se u ćeliju te se provjeravaju mjehurići zraka na membrani i brtvi elektrode. Zatim se metodom slijednog razrjeđivanja uzima 25 mL otopine u kojoj se vršilo mjerenje i dodaje se 25 mL odabranog pufera (odgovarajućeg pH).

Mjerenje je provedeno pri sobnoj temperaturi. Svako mjerenje ponavlja se dva puta.

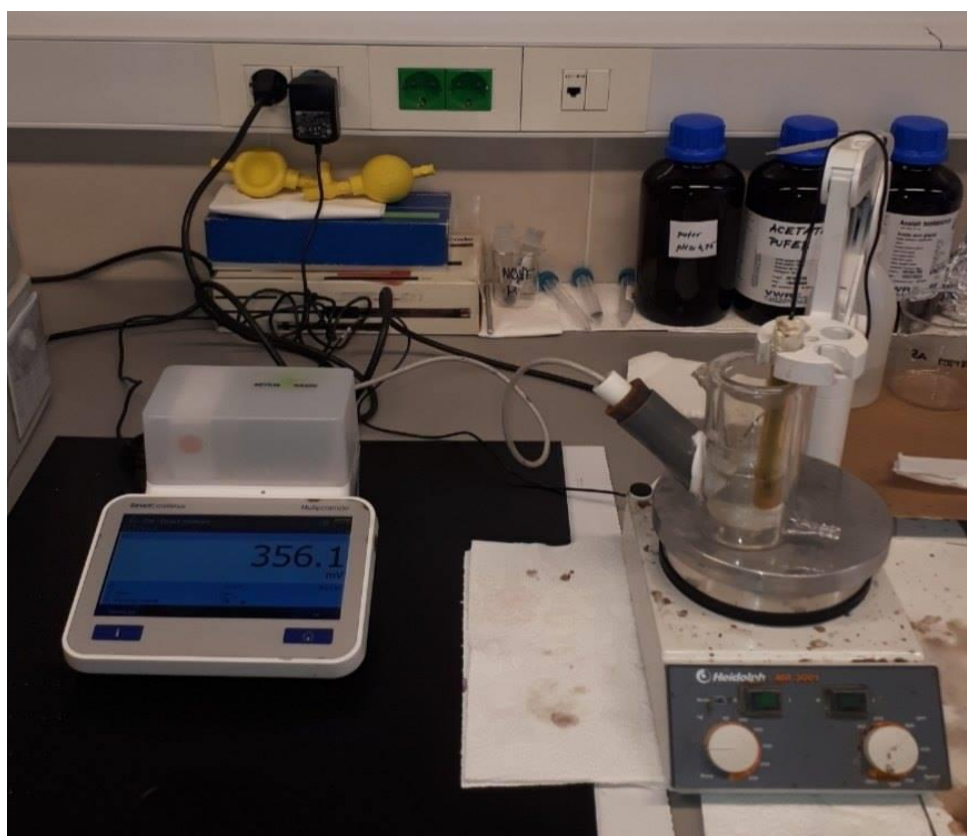

**Slika 7.** Prikaz potenciometrijskog mjerenja

## 2.4 Rezultati


### Testiranje odziva elektrode na Ag<sup>+</sup> ione

#### Membrane 113, 116, 117

#### Prvo mjerenje pri pH = 0

**Tablica 1.** Izmjereni potencijal testiranja odziva elektrode na srebrove katione

		<b>M113</b>	<b>M116</b>	<b>M117</b>
<b>[Ag<sup>+</sup>] / mol L<sup>-1</sup></b>	<b>pAg</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>
0,10076	1,00	402,2	399	308,6
0,05038	1,30	348,7	358,9	304,7
0,02519	1,60	337	345,8	359,6
0,012595	1,90	329,8	336,9	350,2
0,006298	2,20	327,4	325,6	343,4
0,003149	2,50	326,3	317,9	338,2
0,001574375	2,80	326,5	311,7	337,8
0,000787188	3,10	326,8	309	335,5
0,000393594	3,40		305,2	334,4
0,000196797	3,71		301,9	333,2
9,83984E-05	4,01		301,2	333,9
4,91992E-05	4,31		299,8	
2,45996E-05	4,61		295,4	
1,22998E-05	4,91		292	
6,1499E-06	5,21		289,9	
3,07495E-06	5,51		289,6	
1,53748E-06	5,81		294,4	

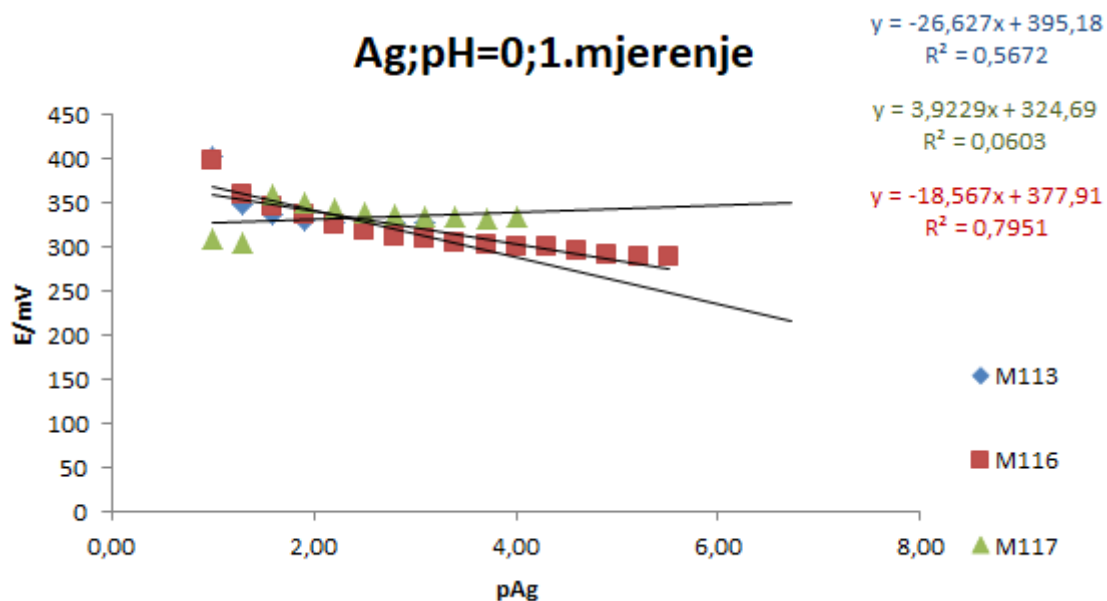


**Slika 8.** Prikaz testiranja odziva elektrode na srebrove katione

Drugo mjerenje pri pH = 0

**Tablica 2.** Izmjereni potencijal testiranja odziva elektrode na srebrove katione

		M113	M116	M117
$[Ag^+] / mol L^{-1}$	pAg	E/mV	E/mV	E/Mv
0,10076	1,00	421	415,4	Nema
0,05038	1,30	397,4	374,7	Rezultata
0,02519	1,60	347,5	362,5	
0,012595	1,90	339	354	
0,0062975	2,20	329,7	346,4	
0,00314875	2,50	326,7	339,9	
0,001574375	2,80	323	337,4	
0,000787188	3,10	322,2	338,2	
0,000393594	3,40	323,5		

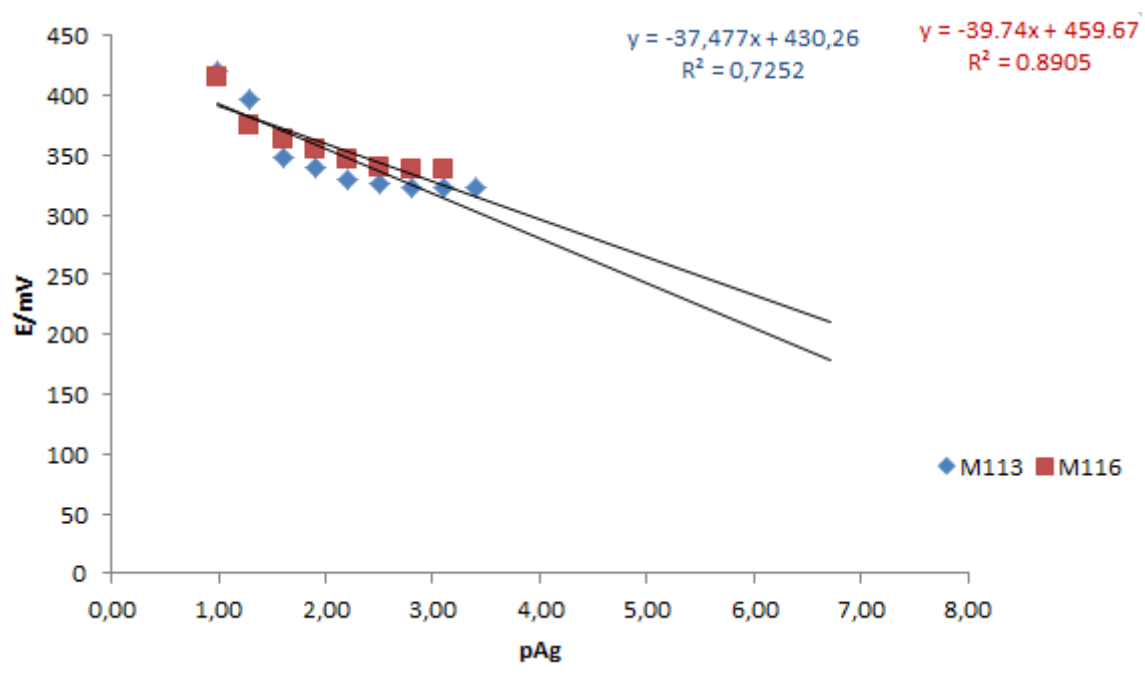


**Slika 9.** Prikaz testiranja odziva elektrode na srebrove katione



Prvo mjerenje pri pH = 1

**Tablica 3.** Izmjereni potencijal testiranja odziva elektrode na srebrove katione

		<b>M113</b>	<b>M116</b>	<b>M117</b>
<b>[Ag<sup>+</sup>] / mol L<sup>-1</sup></b>	<b>pAg</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>
0,10076	1,00	386,5	422,1	420,9
0,05038	1,30	379,5	405,9	411,4
0,02519	1,60	376,5	397,2	386,9
0,012595	1,90	374,3	373,7	369,5
0,0062975	2,20	371,8	367,1	360,5
0,00314875	2,50	370,3	354,4	347,5
0,001574375	2,80	369,5	347,4	339
0,000787188	3,10	367,9	343,3	328,7
0,000393594	3,40	366,7	336,2	323,3
0,000196797	3,71	366,3	328,8	319,4
9,83984E-05	4,01	365,7	329,1	320,9
4,91992E-05	4,31	364,9		
2,45996E-05	4,61	363,1		
1,22998E-05	4,91	363,6		

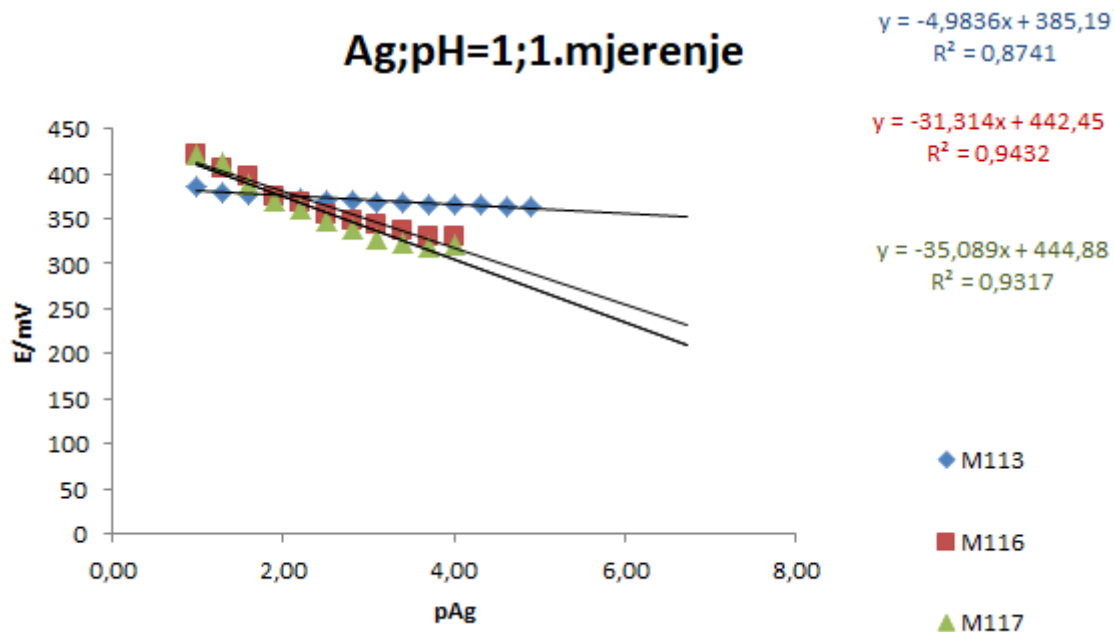


**Slika 10.** Prikaz testiranja odziva elektrode na srebrove katione

Drugo mjerenje pri pH = 1

**Tablica 4.** Izmjereni potencijal testiranja odziva elektrode na srebrove katione

		<b>M113</b>	<b>M116</b>	<b>M117</b>
$[Ag^+] / mol L^{-1}$	<b>pAg</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>
0,10076	1,00	413	415,1	404,4
0,05038	1,30	398,5	395,1	390,4
0,02519	1,60	383,9	381,8	379,3
0,012595	1,90	372,4	367,3	371,6
0,0062975	2,20	363,3	356,1	360,8
0,00314875	2,50	355,4	348,5	353,3
0,001574375	2,80	349,7	341	346,4
0,000787188	3,10	345	335	342,2
0,000393594	3,40	341,6	330,2	340,6
0,000196797	3,71	339,5	327,4	337,8
9,83984E-05	4,01	337,6	326,5	337,3

4,91992E-05	4,31	336,2	326,2	337,1
2,45996E-05	4,61	334,9	325,7	336,6
1,22998E-05	4,91	334,9	324,5	336,5
6,1499E-06	5,21	334,8	323,9	
3,07495E-06	5,51	334,6	323	
1,53748E-06	5,81	335	319,4	
7,68738E-07	6,11		317,5	

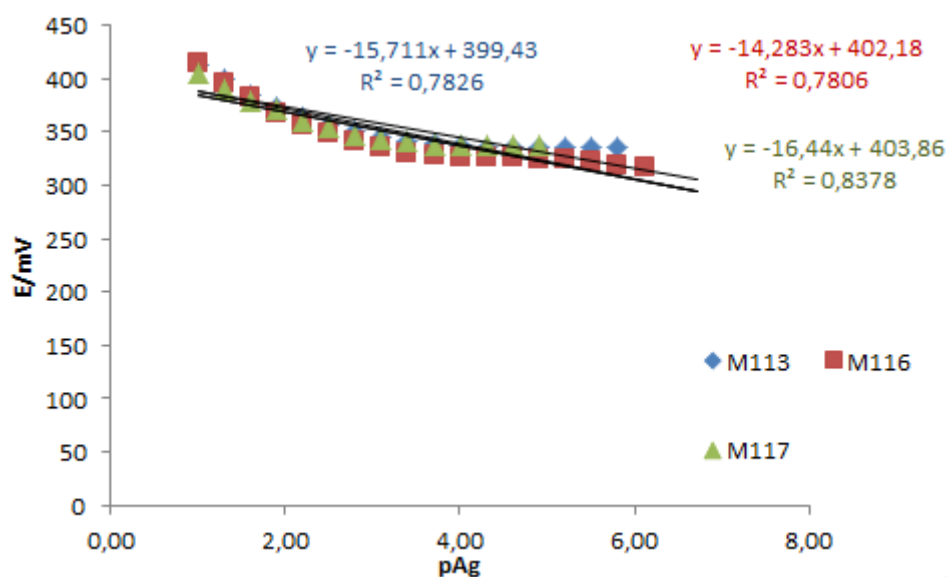


**Slika 11.** Prikaz testiranja odziva elektrode na srebrove katione

Prvo mjerenje pri **pH = 2**

**Tablica 5.** Izmjereni potencijal testiranja odziva elektrode na srebrove katione

		<b>M113</b>	<b>M116</b>	<b>M117</b>
<b>[Ag<sup>+</sup>] / mol L<sup>-1</sup></b>	<b>pAg</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>
0,10076	1,00	413	417,9	420
0,05038	1,30	398,5	413,8	405,2
0,02519	1,60	383,9	401,4	391
0,012595	1,90	372,4	390,4	378,2
0,0062975	2,20	363,3	376,5	359,5
0,00314875	2,50	355,4	365,3	352,4
0,001574375	2,80	349,7	353,7	344
0,000787188	3,10	345	344,9	334,9
0,000393594	3,40	341,6	335,5	330
0,000196797	3,71	339,5	330,6	325,5
9,83984E-05	4,01	337,6	325,1	321,9
4,91992E-05	4,31	336,2	322	320,4
2,45996E-05	4,61	334,9	320,9	314,6
1,22998E-05	4,91	334,9	317,5	315,3
6,1499E-06	5,21		314,7	
3,07495E-06	5,51		311,4	
1,53748E-06	5,81		309,6	
7,68738E-07	6,11		307,7	
3,84369E-07	6,42		307,5	
1,92184E-07	6,72		306,1	
9,60922E-08	7,02		304,5	
4,80461E-08	7,32		302,6	
2,40231E-08	7,62		303,7	

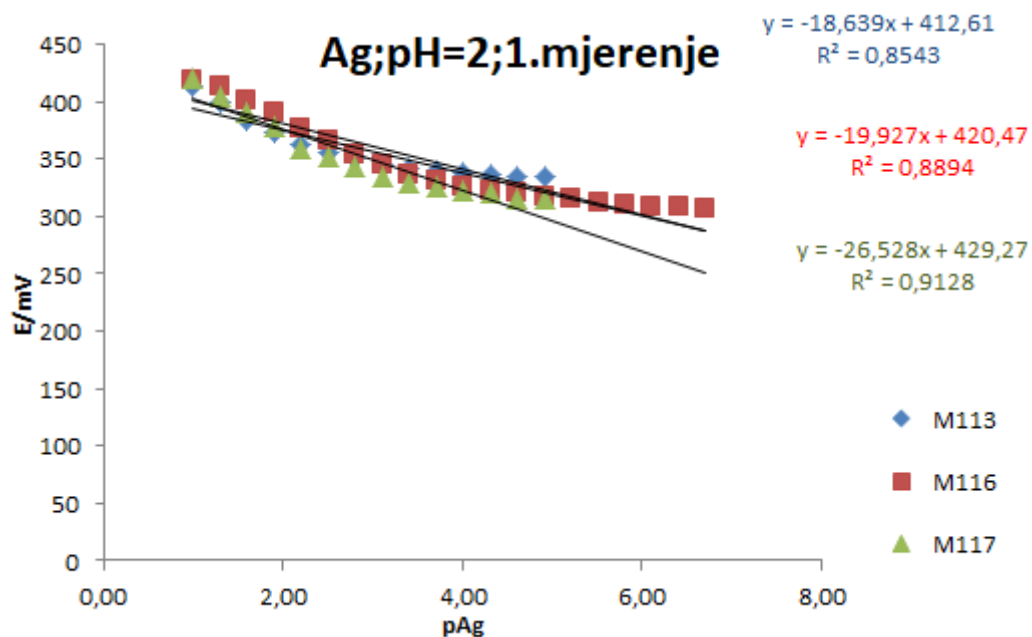


**Slika 12.** Prikaz testiranja odziva elektrode na srebrove katione

Drugo mjerjenje pri pH = 2

**Tablica 6.** Izmjereni potencijal testiranja odziva elektrode na srebrove katione

		M113	M116	M117
$[Ag^+] / mol L^{-1}$	pAg	E/mV	E/mV	E/mV
0,10076	1,00	400,3	424	408,9
0,05038	1,30	391,3	411,3	400,3
0,02519	1,60	375,6	397,4	389,7
0,012595	1,90	373,3	382,6	376,5
0,0062975	2,20	359	367,9	365,6
0,00314875	2,50	344,7	353,4	353
0,001574375	2,80	332,6	339,2	347,5
0,000787188	3,10	320,6	327,4	334
0,000393594	3,40	313	316,7	329,2
0,000196797	3,71	305,7	309,8	

9,83984E-05	4,01	300,6	304,6	
4,91992E-05	4,31	296,8	301,2	
2,45996E-05	4,61	295	298,8	
1,22998E-05	4,91	293,6	297	
6,1499E-06	5,21	292,4	295,6	
3,07495E-06	5,51	292,7	295,1	
1,53748E-06	5,81		294,8	
7,68738E-07	6,11		294,1	
3,84369E-07	6,42		295,3	

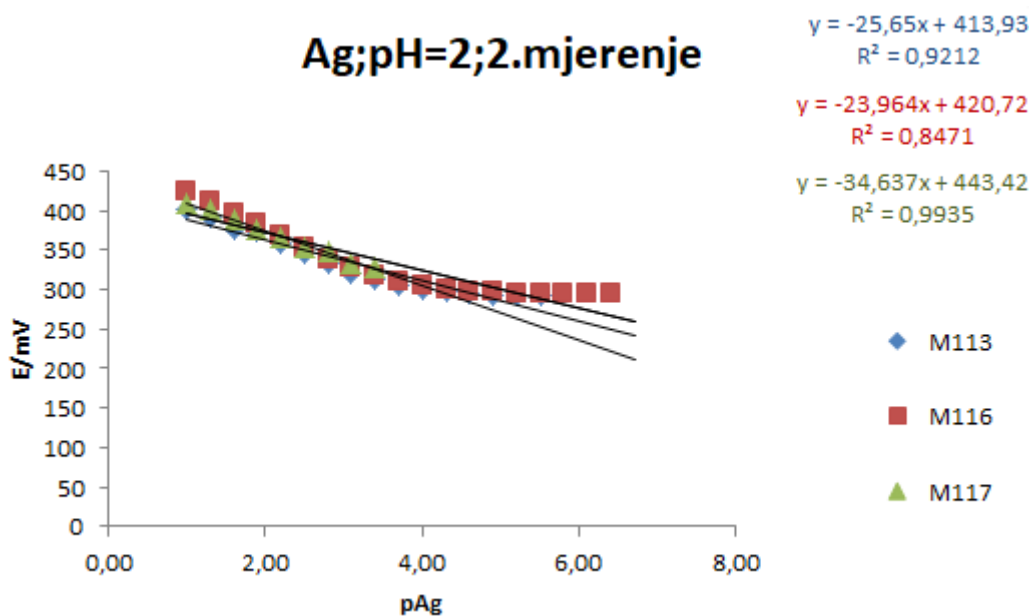

**Slika 13.** Prikaz testiranja odziva elektrode na srebrove katione


## Testiranje odziva elektrode na Cl<sup>-</sup> ione

### Membrane 113, 116, 117

Prvo mjerenje pri pH = 0

**Tablica 7.** Izmjereni potencijal testiranja odziva elektrode na kloridne ione

		<b>M113</b>	<b>M116</b>	<b>M117</b>
<b>[Cl<sup>-</sup>] / mol L<sup>-1</sup></b>	<b>pCl</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>
0,1	1,00	172,9	181,6	84,2
0,05	1,30	193,2	178,1	95,6
0,025	1,60	205,7		143,4
0,0125	1,90	221,9		169,5
0,00625	2,20	251,6		185,7
0,003125	2,51	272		208,7
0,0015625	2,81	291,2		230,7
0,00078125	3,11	302,3		251
0,000390625	3,41	310,4		271,7
0,000195313	3,71	317,5		280,6
9,76563E-05	4,01	325,6		286,5
4,88281E-05	4,31	327		294,3
2,44141E-05	4,61	328,4		295,5
1,2207E-05	4,91	329,3		296,5
6,10352E-06	5,21	330,3		298,4
3,05176E-06	5,52	331,6		299,4
1,52588E-06	5,82	332,3		300
7,62939E-07	6,12	333,1		300,6
3,8147E-07	6,42	334		300,9
1,90735E-07	6,72	334,5		300,5
9,53674E-08	7,02	335		
4,76837E-08	7,32	335,7		

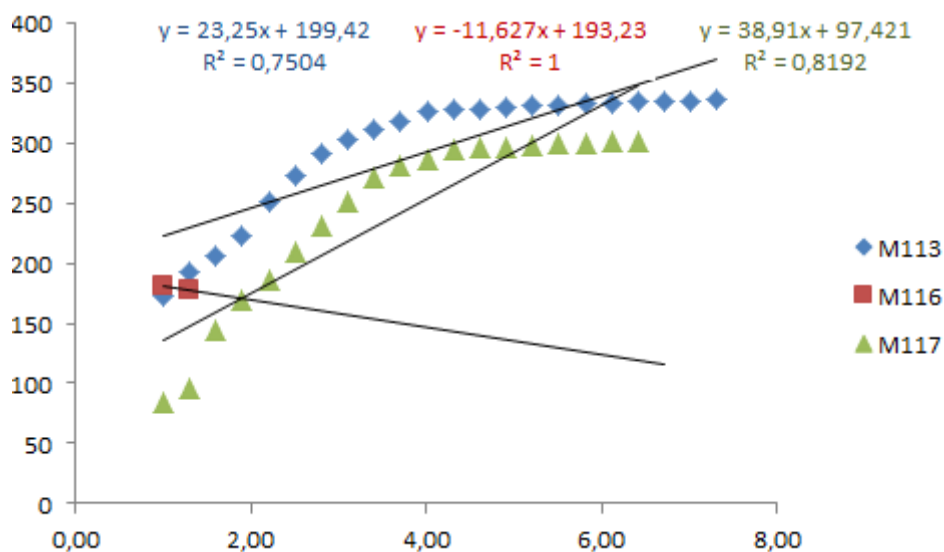

**Slika 14.** Prikaz testiranja odziva elektrode na kloridne ione


Drugo mjerenje pri pH = 0

**Tablica 8.** Izmjereni potencijal testiranja odziva elektrode na kloridne ione

		M113	M116	M117
[Cl <sup>-</sup> ] / mol L <sup>-1</sup>	pCl	E/mV	E/mV	E/mV
0,1	1,00	204,6	nema	148,4
0,05	1,30	250,7	rezultata	150,1
0,025	1,60	251,2		155,2
0,0125	1,90	257,9		176
0,00625	2,20	263,3		195,8
0,003125	2,51	270,3		213,1
0,0015625	2,81	281,4		239,7
0,00078125	3,11	292,1		242,4
0,000390625	3,41	304,3		255,7
0,000195313	3,71	311,2		270,9
9,76563E-05	4,01	317,6		272,6
4,88281E-05	4,31	321,9		276,1
2,44141E-05	4,61	325,1		286,4
1,2207E-05	4,91	326,8		301,6



6,10352E-06	5,21	328		301,4
3,05176E-06	5,52	329,3		
1,52588E-06	5,82	330,6		
7,62939E-07	6,12	331,4		
3,8147E-07	6,42	332,2		
1,90735E-07	6,72	333,2		

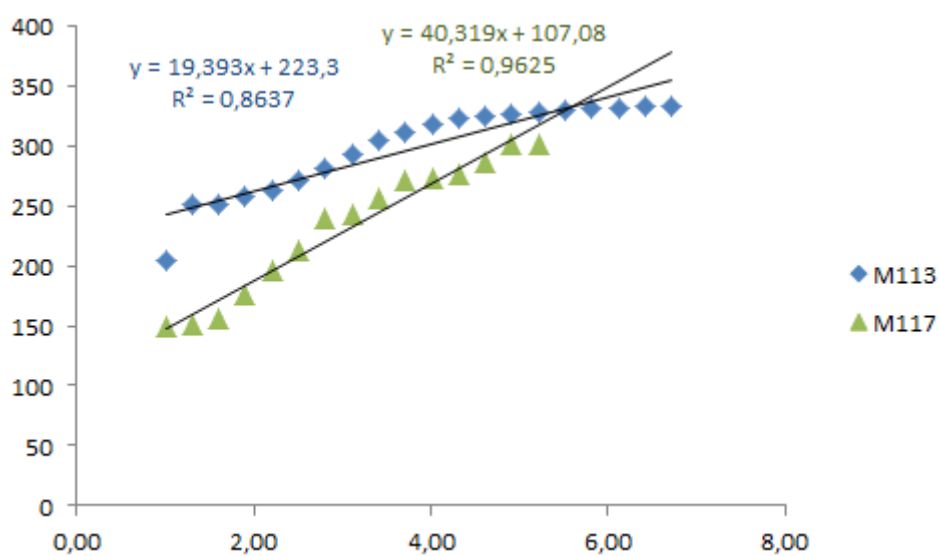


**Slika 15.** Prikaz testiranja odziva elektrode na kloridne ione

Prvo mjerenje pri pH = 1

**Tablica 9.** Izmjereni potencijal testiranja odziva elektrode na kloridne ione

		<b>M113</b>	<b>M116</b>	<b>M117</b>
<b>[Cl<sup>-</sup>] / mol L<sup>-1</sup></b>	<b>pCl</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>
0,1	1,00	46,7	119,2	91,2
0,05	1,30	55,2	115,1	123,2
0,025	1,60	72,5		150,9
0,0125	1,90	99,1		169,4
0,00625	2,20	118,5		189,2
0,003125	2,51	142,3		206,7
0,0015625	2,81	164,9		221,9
0,00078125	3,11	193,7		243,4
0,000390625	3,41	219,5		264,4
0,000195313	3,71	258		279,3
9,76563E-05	4,01	270,5		292,9
4,88281E-05	4,31	276,9		298,5
2,44141E-05	4,61	278,3		301,4
1,2207E-05	4,91	283,2		301,9
6,10352E-06	5,21	285,7		303,9
3,05176E-06	5,52	282,5		305,3
1,52588E-06	5,82			306,3
7,62939E-07	6,12			307,4
3,8147E-07	6,42			307,6
1,90735E-07	6,72			308,1
9,53674E-08	7,02			307,6
4,76837E-08	7,32			309,3
2,38419E-08	7,62			309,4
1,19209E-08	7,92			309,7
5,96046E-09	8,22			308,4

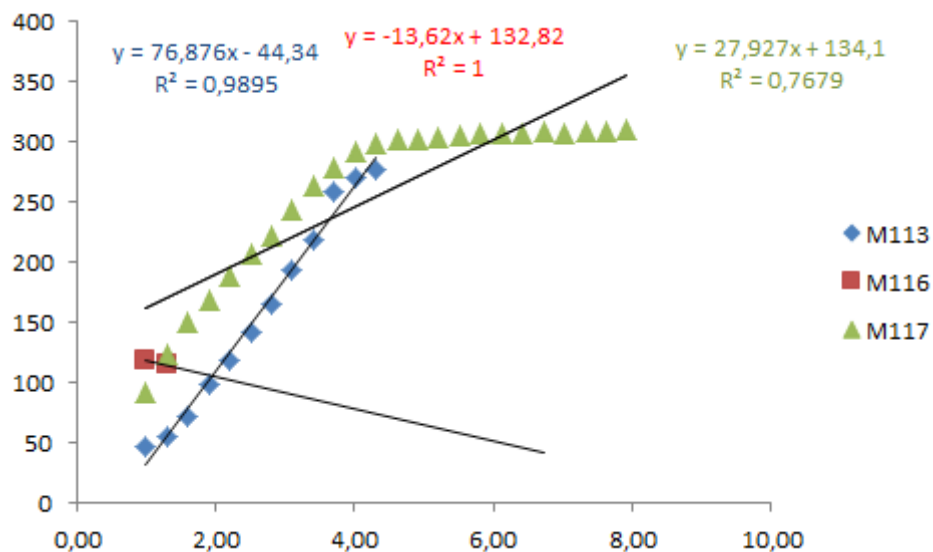


**Slika 16.** Prikaz testiranja odziva elektrode na kloridne ione

Drugo mjerenje pri **pH = 1**

**Tablica 10.** Izmjereni potencijal testiranja odziva elektrode na kloridne ione

		<b>M113</b>	<b>M116</b>	<b>M117</b>
<b>[Cl<sup>-</sup>] / mol L<sup>-1</sup></b>	<b>pCl</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>
0,1	1,00	124,8	nema	90,1
0,05	1,30	129,3	rezultata	97
0,025	1,60	141,3		123,5
0,0125	1,90	156,4		146,2
0,00625	2,20	166,4		168,1
0,003125	2,51	176		195,3
0,0015625	2,81	196,9		230,5
0,00078125	3,11	213,2		258,3

0,000390625	3,41	229		277,4
0,000195313	3,71	232,7		292,8
9,76563E-05	4,01	256,1		300,4
4,88281E-05	4,31	269,9		304,3
2,44141E-05	4,61	274,9		306,9
1,2207E-05	4,91	276,4		308,3
6,10352E-06	5,21	278,6		308,9
3,05176E-06	5,52	281		309,4
1,52588E-06	5,82	282,5		310,1
7,62939E-07	6,12	283,4		311,2
3,8147E-07	6,42	280		312,2
1,90735E-07	6,72			311,9

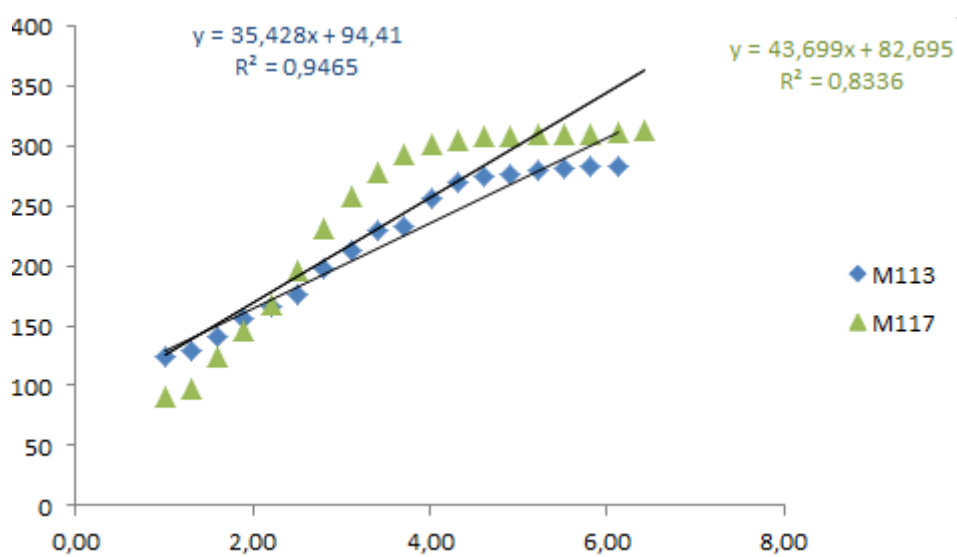


**Slika 17.** Prikaz testiranja odziva elektrode na kloridne ione

Prvo mjerenje pri pH = 2

**Tablica 11.** Izmjereni potencijal testiranja odziva elektrode na kloridne ione

		<b>M113</b>	<b>M116</b>	<b>M117</b>
<b>[Cl<sup>-</sup>] / mol L<sup>-1</sup></b>	<b>pCl</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>	<b>E/mV</b>
0,1	1,00	77,9	101,3	121,8
0,05	1,30	80,9	103,8	123,4
0,025	1,60	92,8	112,8	133,4
0,0125	1,90	98	123	149,9
0,00625	2,20	118,7	132,1	168,6
0,003125	2,51	131,1	143,9	186,1
0,0015625	2,81	145,6	170,7	214,6
0,00078125	3,11	163,6	203,3	240,9
0,000390625	3,41	180,6	255,2	263,8
0,000195313	3,71	198	263,3	274,5
9,76563E-05	4,01	212,8	274	280,4
4,88281E-05	4,31	220,4	275	292,2
2,44141E-05	4,61	227	278,5	295,1
1,2207E-05	4,91	233,5	281,3	296,4
6,10352E-06	5,21	236,6	280,4	297,5
3,05176E-06	5,52	237,1		298,6
1,52588E-06	5,82	240,9		298,9
7,62939E-07	6,12	245,2		298,5
3,8147E-07	6,42	244,6		

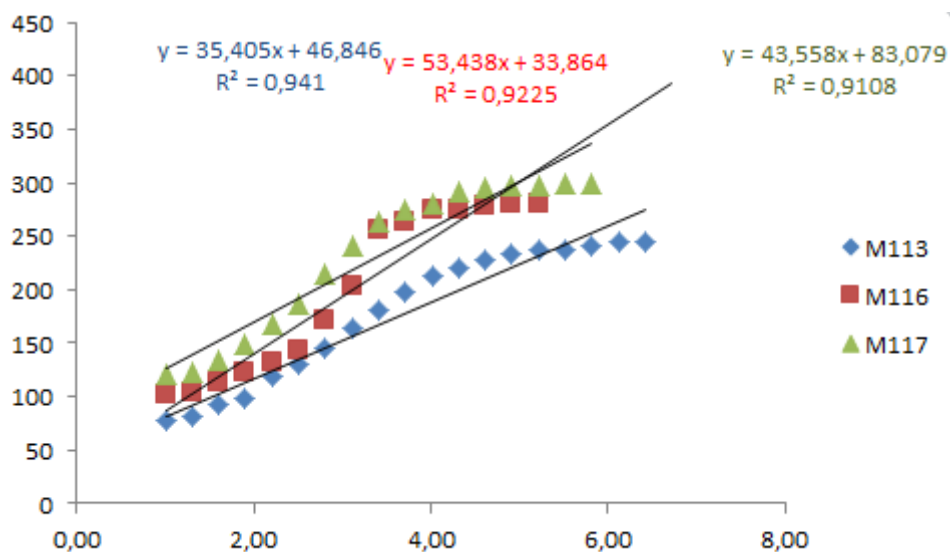


**Slika 18.** Prikaz testiranja odziva elektrode na kloridne ione

Drugo mjerenje pri pH = 2

**Tablica 12.** Izmjereni potencijal testiranja odziva elektrode na kloridne ione

		M113	M116	M117
[Cl <sup>-</sup> ] / mol L <sup>-1</sup>	pCl	E/mV	E/mV	E/mV
0,1	1,00	77,9	41,9	92,6
0,05	1,30	80,9	46	97,1
0,025	1,60	92,8	63,8	113,2
0,0125	1,90	98	71,9	128,3
0,00625	2,20	118,7	104,6	161,4
0,003125	2,51	131,1	113,8	189,9
0,0015625	2,81	145,6	165,1	214,7
0,00078125	3,11	163,6	189,1	238,7
0,000390625	3,41	180,6	231,6	248,4
0,000195313	3,71	198		262,5
9,76563E-05	4,01	212,8		274,2
4,88281E-05	4,31	220,4		275,4
2,44141E-05	4,61	227		279,8

1,2207E-05	4,91	233,5		281,1
6,10352E-06	5,21	236,6		283,4
3,05176E-06	5,52	237,1		285,3
1,52588E-06	5,82	240,9		286,6
7,62939E-07	6,12	245,2		288,1
3,8147E-07	6,42	244,6		289,1
1,90735E-07	6,72			288,6

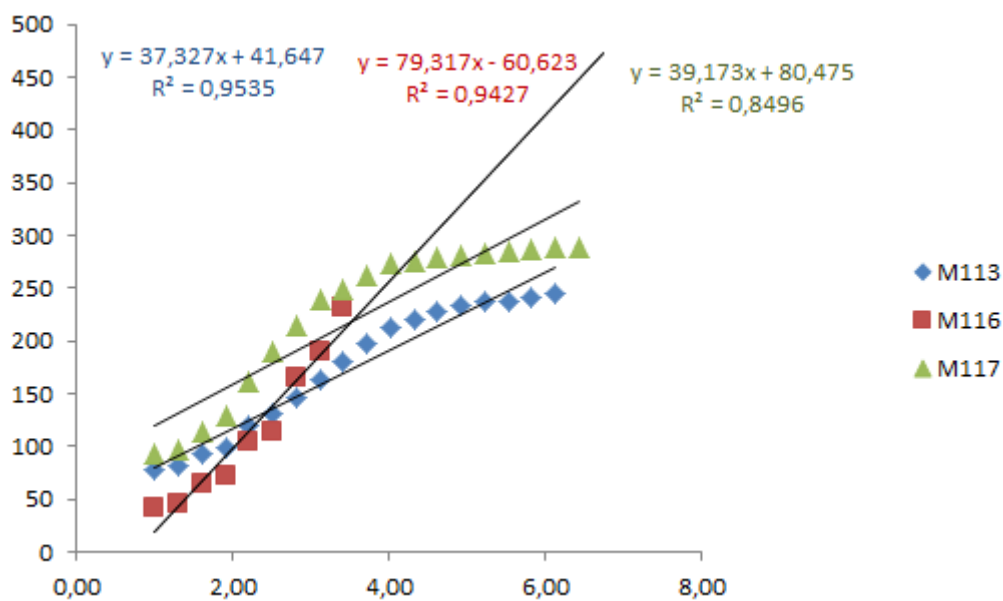

**Slika 19.** Prikaz testiranja odziva elektrode na kloridne ione

### **3 RASPRAVA**



Cilj svakog analitičkog laboratorija jest dobiti brze, točne i vjerodostojne rezultate analize koji moraju biti znanstveno potkrijepljeni i zakonski obranjivi. Kvaliteta rada svih analitičkih laboratorija procjenjuje se na osnovi točnosti i sljedivosti analitičkih rezultata. Stoga je važno vrednovanjem (validacijom) metode pokazati da analitička metoda udovoljava kriterijima koji se odnose na odgovarajuće značajke učinkovitosti. Stoga osiguranje kvalitete reprezentativnog uzorka zahtjeva kontrolu i upravljanje kvalitetom.

Ionsko-selektivne elektrode predstavljaju senzore koji se koriste u potenciometrijskim, konduktometrijskim i amperometrijskim metodama, premda se sam pojam odnosi na potenciometrijske senzore. Ionsko selektivne elektrode kao elektrode reagiraju na aktivitet određenog iona (analita ili primarnog iona) u otopini. Daju široko koncentracijsko područje mjerenja te brz odziv.

U ovom radu opisan je razvoj ionsko-selektivnih membrana s ciljem razvijanja jednostavnijih potenciometrijskih senzora za određivanje srebrovih i kloridnih iona. U tu svrhu korištene su tri membrane dopirane kojima su dodane čestice cinkovog oksida. Uz srebrov sulfat, membrane sadrže srebrov klorid te teflon (PTFE) koji se koristi kao neaktivni nosač(matrica). Mjerenjem je utvrđeno da pripremljene membrane pokazuju slab odziv prema promjeni koncentracije u slučaju srebrovih, ali i u slučaju kloridnih iona.

Na odziv elektrode osim pH vrijenosti, može utjecati i količina prisutnog iona. Ako se pretpostavi da je prah za membranu dobro homogeniziran, na odziv membrane mogu utjecati i ioni iz otopine koji će sudjelovati u neželjenim reakcijama s ionskim vrstama iz membrane.

Temeljem eksperimentalnih rezultata, može se zaključiti da korištene membrane ipak nisu prikladne za razvoj novih potenciometrijskih metoda za određivanje srebrovih i kloridnih iona. Navodimo prijedlog da se testiranje membrana provede pri višim vrijednostima pH vodenih otopina.

## **4 ZAKLJUČAK**

Na osnovu provedenog ispitivanja može se donijeti sljedeći zaključak:

Opisana potenciometrijska metoda pokazuje slab odziv membrana na srebrove i kloridne ione pri  $\text{pH} = 0, 1$  i  $2$ . Prijedlog za daljnje ispitivanje su rad pri višem  $\text{pH}$  i promjena sastava membrana.

## **5 LITERATURA**

1. <http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=49739> (24.8.2018.)
2. [http://www.periodni.com/enig/potenciometrijski\\_senzori.html](http://www.periodni.com/enig/potenciometrijski_senzori.html) (24.8.2018.)
3. D.Skoog , D.M. West, J.F. Holler , Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999
4. <http://www.xmprs.com.cn/> (25.8.2018.)
5. D. Harvey, Modern analytical chemistry, London, 2000.
6. R. J. Cremlyn , An Introduction to Organosulfur Chemistry , John Eiley and Sons Chichester , 1996.
7. F. Scholtz (Edition), Electroanalytical Methodes, 2nd Edition, Springer, Berlin, 2010.
8. <http://glossary.periodni.com/glosar.php?hr=elektroda+drugog+reda> (26.8.2018.)